
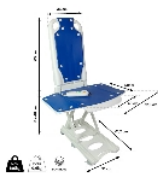


## Elévateur de bain Galapagos

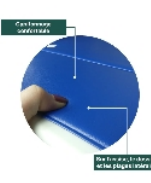

- 822068

### • Un bain tout en relaxation et en confort

Notre [siège élévateur](#) Galapagos permet de prendre un bain confortablement, car ce siège vous descend doucement au fond de votre baignoire et vous remonte lorsque vous avez terminé.

Il a été conçu avec du plastique léger recyclé de qualité. Cela permet à l'élévateur de bain d'être plus facile à transporter ou à ranger (et donc à l'emmener lorsque que vous n'êtes pas chez vous).

La batterie lithium-ion lui permettant de fonctionner est située dans la télécommande. Le moteur et la télécommande sont totalement étanches et peuvent être utilisés même sous l'eau.

Le châssis est robuste et s'articule, permettant au siège de monter jusqu'à 48 cm et de descendre jusqu'à 8 cm de hauteur.

Fonction sécurité : l'élévateur ne descend plus si la batterie de la télécommande n'est plus suffisamment rechargée et permet uniquement la remontée du siège élévateur.

Equipé d'un capitonnage complet, même sur les plages latérales.

Le produit ne nécessite aucun montage et est utilisable dès réception.

Dimensions assise : larg. 40 x prof. 50 x haut. 8 à 48 cm.

Larg. avec plages latérales : 72,5 cm.

Dimensions dossier : larg. 36 x haut. 65 cm.

Dimensions base : larg. 31 x prof. 61,2 cm.

Montée 45s, descente 30s.

Batterie 15 V 2.2Ah.

Temps de charge 3 heures.

Inclinaison du dossier maximum 45°.

Poids sans télécommande : 9,6 kg.

Poids maximum utilisateur : 140 kg.

Garantie à vie sur moteur et structure, 2 ans sur batterie et télécommande.