
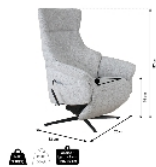
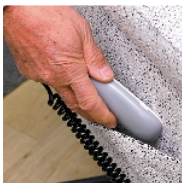


Fauteuil releveur Nest

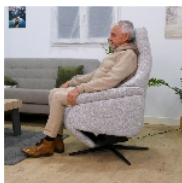

- Tissu - 821159.TISSU

- Cuir - 821159.CUIR

- **Fauteuil 3 moteurs**
- **Design élégant et gain de place**
- **Structure pivotante à 330°**
- **Repose-tête réglable en avant/arrière**

Ce fauteuil releveur et inclinable s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs grâce à son design attrayant et ses fonctionnalités haut de gamme. Il est équipé de 3 moteurs pour le réglage indépendant du dossier et des repose-pieds, et un moteur pour le positionner en zéro gravité, très confortable.

Le fauteuil peut pivoter à 330° en position assise ou inclinée, mais se bloque lorsqu'il commence à se lever.

Fonction de levage avec extension progressive du repose-jambes, fonction d'inclinaison avec différents angles. Réglage manuel de l'appui-tête. Télécommande filaire avec poche de rangement latérale.

Sa forme enveloppante garantit un excellent soutien du dos et un confort exceptionnel.

Piètement 4 branches élégant en noir mat.

Option batterie : le fauteuil est livré avec une prise secteur. Il est compatible avec l'option batterie disponible séparément. Cette batterie permet de l'utiliser de manière autonome en la plaçant simplement à l'arrière du fauteuil.

2 options de revêtement :

- Tissu gris clair chiné de grande qualité, résistant à l'abrasion.
- Cuir + TPU couleur macchiato (le cuir est utilisé sur toutes les surfaces de contact : dossier, assise et accoudoirs).

Dimensions hors tout : largeur 76 x profondeur 82 x hauteur 117 cm.

Dimensions de l'assise : largeur 47 x profondeur 50 x hauteur 49 cm

Densité de la mousse de l'assise et accoudoirs : 55

Densité de la mousse du dossier : 50

Poids maximal de l'utilisateur : 130 kg.

Variantes :

- Tissu
- Cuir