


# FAUTEUIL RELEVEUR 1 MOTEUR

## CONFORT CLASSIC



### REVÊTEMENT


**Velours** toucher doux, ou tissu (Anthracite - Lin) anti tâches : fibre synthétique 100% polyester très haute résistance aux frottements (test abrasion >100 000 tours « Martindale »)

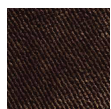

**Chocolat**  
(Réf. 1000)  
3701183200115\*



**Chamois**  
(Réf. 1001)  
3701183210015\*

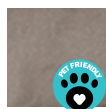

**Gris Cendré**  
(Réf. 1003)  
3701183210039\*



**Tissu Anthracite**  
(Réf. 1014)  
3701183210145\*



**Tissu Lin**  
(Réf. 1017)  
3701183210176\*



### REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE OPTIONNEL

**Revêtement Altus non feu** (spécial fuites urinaires légères à modérées), fibres textile 100% polyester, traité antimicrobiens, anti-odeurs, respirant, déperlant et traité non feu. Hyper résistant aux frottements (test abrasion > 100 000 tours "Martindale")




**Gris**  
(Réf. 1011)  
3701183210114\*




**Marron**  
(Réf. 1018)  
3701183210183\*



### POSITIONS

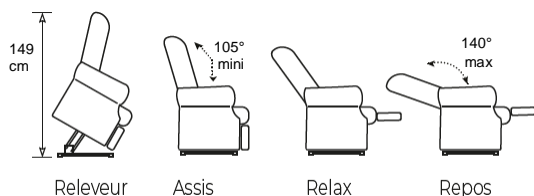


### DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM

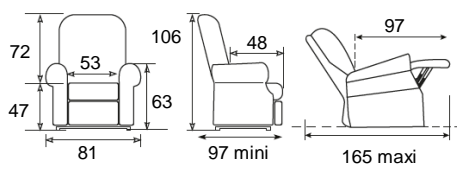

Ecartement\*\* du mur : 43 cm

### ADAPTÉ POUR LES PERSONNES

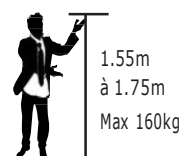

€TTC

Eco-participation = €TTC

### GARANTIES

- Châssis métal fixe = **10 ans**
- Moteur(s) = **5 ans**
- Mécanisme / structure bois = **3 ans**
- Transformateur / Télécommande = **2 ans**

### COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

### Suspension et garniture

- **Assise** : 5 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance 2 mousses (polyuréthane) de densité 24 et 28 kg/m<sup>3</sup>
- **Dossier** : 3 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance fibre de polyester
- **Accoudoirs** : rembourrage mousse 25kg/m<sup>3</sup>

### Structure

- Métal et bois (érable séché au four)

### Pièces Electriques CE

- **Transformateur** OKIN avec compartiment pour 2 piles 9V
- **Vérin** : AC100-240V AC - Max 2.2A 50W - 24V 2A
- **Télécommande** « 2 touches »



### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Protège accoudoirs et appui tête
- Technologie « Smart Tech » (diodes de diagnostic de fonctionnement (Transformateur, télécommande, vérin) vous permettant de vérifier l'état des branchements, et le bon fonctionnement du fauteuil et de ses composants électriques.
- 1 poche latérale de rangement

Options possibles	Accessoires
Télécommande à gauche	Coussin tête-cou
Transformation en lift (fonction rehausseur en remplacement de la fonction releveur)	Protection d'assise
Fonctionnement sur batterie Lithium	Protège fauteuil intégral
Revêtement Altus traité non feu (spécial fuites urinaires légères à modérées) (test > 100 000 tours) résistance Martindale	

### INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

**Fabrication** : Chine • **Poids** : 54kg

**Distributeur en France** : Medtrade SAS

(\* : Code EAN)

(angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(\*\* : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))