


FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

CONFORT SPECIFIQUE GRANDE TAILLE



REVÊTEMENT

Velours toucher doux, anti tâches : fibre synthétique 100% polyester très haute résistance aux frottements (test abrasion >100 000 tours « Martindale »)

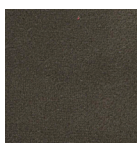


Bronze
(Réf. 1591)
3701183215911*




Taupe
(Réf. 1592)
3701183215928*


POSITIONS

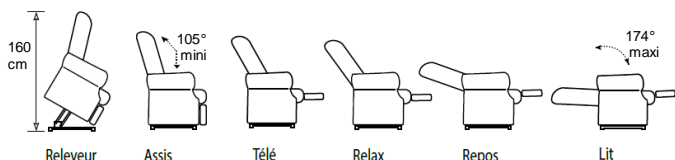

DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM

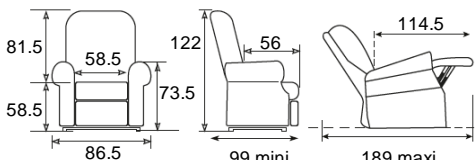

ADAPTÉ POUR LES PERSONNES

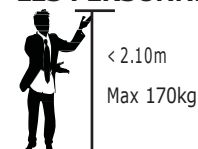

Ecartement** du mur : 66 cm

(* : Code EAN) (angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5%)

(** : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini))

€TTC

Eco-participation = €TTC

GARANTIES

- Châssis métal fixe = 10 ans
- Moteur(s) = 5 ans
- Mécanisme / structure bois = 3 ans
- Transformateur / Télécommande = 2 ans

COMPOSANTS

Une sélection de composants et une fabrication, de qualité, pour une utilisation quotidienne prolongée dans un confort inégalé.

Suspension et garniture

- **Assise** : 5 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance + 49 ressorts hélicoïdaux verticaux ensachés individuellement posés sur mousse (polyuréthane) de densité 24 kg/m³
- **Dossier** : 3 ressorts ondulés anti-affaissement (zigzag Nosag) en acier trempé haute résistance + fibre de polyester
- **Accoudoirs** : rembourrage mousse 25kg/m³

Structure

- Métal et bois (érable séché au four)

Pièces Electriques CE

- **Transformateur** OKIN
- **2 vérins** : 1 vérin principal (assise-repose pieds/ fonction releveur) 1 vérin de dossier (inclinaison) • AC100-240V AC – Max 2.2A 50W -24V 2A
- **Télécommande** programmable « Autodrive »



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Protège accoudoirs et appui tête
- Technologie « Smart Tech » (diodes de diagnostic de fonctionnement (Transformateur, télécommande, vérin) vous permettant de vérifier l'état des branchements, et le bon fonctionnement du fauteuil et de ses composants électriques.
- 2 poches latérales de rangement
- Fonction Maxi Confort : combinaison infinie de positions dossier/assise grâce à 2 moteurs indépendants (dossier et assise-repose pieds). Des positions TV, zéro gravité et lit, et un soutien/maintien continu dos-fessier- segment jambier.

Options possibles	Accessoires
Télécommande à gauche	Coussin tête nuque
Transformation en lift (fonction rehausseur en remplacement de la fonction releveur)	Protection d'assise / Protège fauteuil intégral
Fonctionnement sur batterie Lithium	Extension de repose pieds

INFORMATIONS GÉNÉRALES PRODUIT

Fabrication : USA • Poids : 64kg

Distributeur en France : Medtrade SAS