

# Wellington

## RELEVEUR 1+1 MOTEURS AVEC FONCTION LIFT ET BATTERIE INTÉGRÉE

**Le partenaire idéal des "aidants"**

### VOUS APPRÉCIEREZ

- Assise et repose jambes munis d'une mousse à mémoire de forme.
- Dossier muni d'oreillettes amovibles pour le maintien de la tête.
- Assise continue avec le repose pieds pour un soutien complet de la totalité du segment jambier.

### UN ENTRETIEN FACILE

- Assise déhoussable pour faciliter l'entretien ou échanger des parties abîmées.
- Accoudoirs et oreillettes du dossier escamotables.
- **NB** : - Son revêtement bénéficie de la norme non-feu EN1021-1 & 2 (retardant au feu, test de la cigarette et test de la flamme)



### ZOOM SUR. REVÊTEMENT « EASYCLEAN »

Revêtement nouvelle génération très facile d'entretien. Il est résistant car moins sensible à l'abrasion (frottements). Le traitement Easyclean permet un simple nettoyage à l'eau pour enlever les taches domestiques les plus communes (café, vin, encre, chocolat...). Il évite l'infiltration immédiate des liquides (propriété déperlante) afin que ceux-ci puissent être absorbés à l'aide d'un simple chiffon propre (de préférence 100% coton). Ce revêtement est également traité contre le développement des champignons, moisissures et bactéries évitant ainsi l'apparition d'odeurs causées par des micro-organismes. Conforme aux exigences « Reach » de non utilisation de substances chimiques nocives pour la santé et l'environnement dans les traitements du revêtement, Retardant au feu (normes EN 1021-1 & 2 (tests de la cigarette & de la flamme)), Le vinyle est anti-bactérien, résistant à l'urée et aux désinfections en milieu hospitalier pour un entretien facile par un lavage fréquent « à la main ».

### « SON PLUS ».

**LA FONCTION LIFT** fonctionne également en position allongée rendant les mobilisations ou « interventions » à effectuer sur la personne alitée moins contraignantes pour le dos des accompagnants ou des personnels soignants.



Kit Coussins pour le maintien latéral de la tête et du tronc (réduit la largeur du dossier); ils peuvent être installés indépendamment l'un de l'autre. Largeur intérieure au niveau de la tête : 22 cm - au niveau du bas du dos (et fond d'assise selon positionnement du coussin sur le dossier) 42 cm



+ ou - 18cm



1



2



3

**1.** 4 roulettes dont 2 à l'arrière avec frein équipent ce fauteuil. Fauteuil facile à déplacer

**2.** Une barre de poussée sur le haut à l'arrière du dossier pour faciliter les déplacements.

**3.** La batterie intégrée (complément d'informations page 4) permet de déplacer le fauteuil, tout en conservant toutes les fonctionnalités du fauteuil, d'une pièce à l'autre en toute « autonomie », sans nécessité forcément de proximité d'une prise murale (sauf en cas de nécessité de recharger la batterie).




oreillettes et accoudoirs amovibles

### ZOOM SUR . « FACILITER LES TRANSFERTS »

Aide au lever et à l'assise avec la fonction releveur. « La fonction "lift" » intégrée permet une élévation de + ou - 18 cm pour régler la hauteur d'assise (à la hauteur du lit ou du fauteuil roulant par exemple) ou permettre le passage d'un souleve patient. Combiné avec la possibilité d'escamoter les accoudoirs et les oreillettes latérales verticales du dossier tous les cas de figure de transferts sont facilités.

### POSITIONS

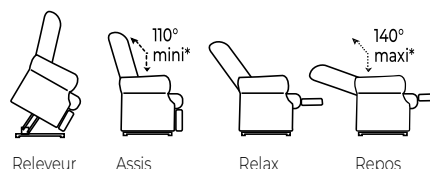


Explications p.3

**MICROFIBRE MIXTE POLYESTER, PU, COTON**  
(Explications p.3)

**VINYLE** (Explications page 3)



### DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM

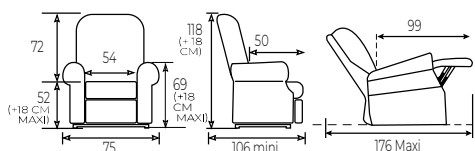

Écartement\*\* du mur : mini 60 cm



\*: angle d'inclinaison en degré centigrade +/- 5% \*\* : distance entre le mur et le haut du dossier, fauteuil en position assise, dossier redressé (inclinaison mini\*)